



BLUETOOTH *SERIES*
CS50

**PERSONAL
SOUND
AMPLIFIER**

**MODE
D'EMPLOI**

MERCI

Merci pour votre acquisition d'un CS50.

Ce kit oreillette amplificateur Bluetooth offre une souplesse et une personnalisation formidables en termes d'ajustement et de réglages sonores, qui vous permettront de mieux entendre dans des contextes spécifiques, tels que des rendez-vous professionnels ou des réunions de famille.



Connectez-vous sur notre site Internet et enregistrez votre CS50 afin de recevoir les mises à jour importantes, des informations sur nos nouveaux produits et des offres exclusives.

SOMMAIRE

Prise en main	4
Oreillette	5
Kit de chargement	6
<i>Charger les batteries</i>	6
Utilisation de votre CS50	8
<i>Personnalisation</i>	8
<i>Installation d'une batterie sur le CS50</i>	9
<i>Positionnement du CS50 sur votre oreille</i>	10
<i>Réglage du volume</i>	10
<i>Sélection d'un réglage environnemental</i>	11
<i>Modifier votre profil par défaut</i>	12
<i>Familiarisation avec votre CS50</i>	13
<i>Jumelage avec des appareils Bluetooth</i>	14
<i>Répondre aux appels téléphoniques</i>	15
<i>Streaming audio</i>	16
<i>Personnalisation avancée</i>	17
Précautions et entretien	18
Annexe	19
<i>Dépannage</i>	19
<i>Garantie limitée d'un an</i>	20
<i>Informations importantes</i>	23

PRISE EN MAIN

Votre kit oreillette CS50 Bluetooth comprend les éléments suivants :



- Oreillette CS50



- Deux batteries rechargeables



- Kit de chargement de batteries



- Trois embouts (petit, moyen, grand)



- Outil de nettoyage de l'oreillette



- Étui de transport

OREILLETTE

Borne de batteries

avec connecteurs magnétiques pour une installation facile et rapide des batteries.

Câble de batterie

flexible s'ajustant confortablement quelque soit la taille de l'oreille.

Manchon

permettant un montage sécurisé de l'embout.

Bouton de programmation

situé sur le bord arrière de l'oreillette basculant entre trois réglages environnementaux.

Bouton de contrôle du volume situé sur la face de l'oreillette permettant à l'utilisateur d'augmenter ou réduire le niveau sonore par paliers de 3 dB.

Microphone directionnel

pour une qualité audio optimisée lors des appels téléphoniques.

Embouts

ajustables à votre oreille comme des écouteurs classiques. L'oreillette CS50 est montée d'origine avec le plus petit embout.

KIT DE CHARGEMENT

**Adaptateur
électrique**
(prise murale)



Station de chargement
munie de deux emplacements
avec des signaux lumineux
LED indépendants



**Câble de
chargement**
micro-USB
vers USB

Charger les batteries

Vos batteries sont légèrement chargées lorsque vous les déballez, mais nous vous recommandons de les charger à fond avant d'utiliser votre CS50. Il faut environ 2 ½ heures pour une charge complète. Avec une batterie entièrement chargée, le CS50 dispose d'une autonomie de 15 heures en écoute normale.

Chargement des batteries :

1. Assemblez le kit de chargement en branchant la petite fiche du câble dans la base de la station et la grosse fiche dans l'adaptateur.



Remarque : Vous pouvez également brancher la plus grosse fiche du câble sur un port USB standard de votre ordinateur.

2. Branchez l'adaptateur dans une prise électrique standard. Lorsque le signal lumineux situé sur le dessus de la station s'allume en bleu, cela confirme que la station de chargement est alimentée.
3. Insérez les batteries dans les deux emplacements en alignant les aimants. Lorsque la batterie est correctement mise en place, le signal lumineux change de couleur. Une lumière rouge indique que la batterie est en charge. Elle passe au vert lorsque la batterie est complètement chargée et prête à l'emploi.

AVERTISSEMENT - Champ magnétique

Susceptible de trouble pour les porteurs de stimulateur cardiaque et de défibrillateur. Ne placez pas l'oreillette ou les batteries du CS50 dans une poche de chemise ou à proximité de votre régulateur cardiaque ou défibrillateur.


UTILISATION DE VOTRE CS50

Personnalisation

1. Le CS50 est fourni avec trois tailles d'embouts : petite (initialement installée sur le manchon l'oreillette), moyenne et grande. Si le plus petit embout n'est pas ajusté à votre oreille, retirez-le du manchon et essayez la taille moyenne ou grande.



Les embouts inclus avec votre appareil CS50 peuvent être taillés pour un confort maximal. Utilisez une paire de ciseaux pour couper le long des lignes sur la tige de l'embout avant de l'attacher à l'manchon du CS50. Il est conseillé de découper en petits incréments afin d'atteindre l'ajustement parfait pour votre oreille.

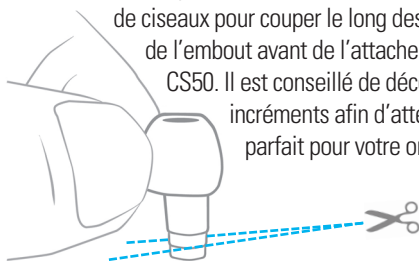

2. Insérez l'embout à fond sur le manchon. L'extrémité de l'embout doit venir en contact avec la base du manchon.

Remarque : Ne portez pas l'oreillette sans embout.

- 3.** Le câble de la batterie peut être ajusté pour optimiser le confort de votre CS50. Tenez le boîtier de l'oreillette dans une main et tirez ou poussez délicatement le câble avec



1 Tenez le boîtier dans une main.

2 Tirez ou poussez délicatement le câble avec votre main libre pour obtenir la longueur désirée.

votre main libre pour obtenir la longueur désirée. Attention de ne pas tirer trop brutalement.




Installation d'une batterie sur le CS50

- 1.** Alignez les contacts et les aimants d'une batterie chargée avec ceux de l'oreillette.
- 2.** Dès que la batterie est enclenchée, l'appareil est en fonction. Il est opérationnel après quelques secondes de délai. Pour éteindre l'appareil, il suffit de déconnecter la batterie.
- 3.** Le CS50 émet un signal sonore distinct qui indique la faiblesse de la batterie. Lorsque vous entendez cinq sons successifs (faible, fort, faible, fort, faible) il est temps de changer la batterie.

UTILISATION DE VOTRE CS50

Positionnement du CS50 sur votre oreille

1. Placez la batterie derrière votre oreille avec le câble de la batterie qui passe au-dessus de celle-ci.
2. Si vous portez des lunettes, placez la batterie entre la branche de vos lunettes et votre oreille. Placer ou ajuster vos lunettes peut créer des interférences avec votre CS50.
3. Insérez délicatement l'embout dans votre oreille en le faisant légèrement glisser pour l'ajuster. La position idéale est ajustée, mais non serrée.

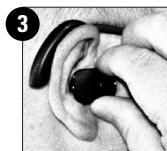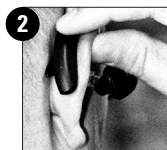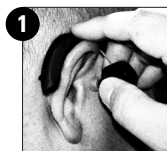

Réglage du volume

Pour augmenter le volume, appuyez sur le bouton du volume. Vous entendrez quatre sons successifs de plus en plus forts qui indiquent le nouveau niveau sonore. Lorsque vous avez atteint le volume maximum, le dernier son de la série est moins fort. Pour baisser le volume, appuyez et maintenez enfoncé le bouton du volume. Vous entendrez quatre sons successifs de moins en moins forts qui indiquent le nouveau niveau sonore.

Sélection d'un réglage environnemental

Le bouton de programmation situé sur le bord arrière de votre CS50 sert à naviguer entre trois réglages environnementaux. Le premier réglage est votre profil d'écoute par défaut. Il sert pour les situations courantes, assez tranquilles. Vous entendrez un bip de confirmation lorsque vous revenez à votre profil par défaut.

Remarque : À la première utilisation, le profil par défaut de votre CS50 se trouve sur le réglage d'origine « Préréglage 1 ». Pour modifier votre profil par défaut, reportez-vous à la page 64.

Les deux autres réglages sont étudiés pour optimiser les performances de votre CS50 dans des situations particulières.

Mode Restaurant – Lorsque vous basculez sur le Mode Restaurant de votre CS50, vous entendrez deux bips brefs de confirmation. Le Mode Restaurant concentre la direction du microphone vers les sons qui viennent en face de vous et atténue les sons non désirés dans des environnements bruyants.

Mode Divertissement – Lorsque vous basculez sur le Mode Divertissement de votre CS50, vous entendrez trois bips brefs de confirmation. Le Mode Divertissement augmente la bande de basses fréquences afin de vous donner un son plus naturel lorsque vous vous trouvez au spectacle ou au concert.

UTILISATION DE VOTRE CS50

Modifier votre profil par défaut

Le CS50 est fourni avec trois profils d'écoute préréglés correspondant à des fréquences de réponses formatées selon les besoins d'amplification les plus typiques. Chaque profil préréglé dispose de réglages automatiques du niveau afin d'optimiser le confort et la qualité de l'audibilité de la parole. Le préréglage d'origine par défaut du CS50 est le « Préréglage 1 ». Pour naviguer vers le préréglage suivant, il vous suffit de presser les touches programme et volume simultanément durant une seconde environ. Une lumière orange clignotera 1, 2 ou 3 fois au dos du CS50 et vous entendrez 1, 2 ou 3 sons aigus qui vous indiqueront quel préréglage vous avez sélectionné.

Remarque : Vous pouvez également utiliser notre Application de Personnalisation depuis votre smartphone ou ordinateur pour assigner l'un des profils préréglés à votre profil par défaut. Enfin, vous pouvez également utiliser l'Application pour créer un profil personnalisé à vos propres besoins. Pour de plus amples informations concernant l'Application, reportez-vous à la page 69 (chapitre de personnalisation avancée).

Préréglage 1 – (Réglage d'origine par défaut.) Stimulation de la bande de hautes fréquences.

Préréglage 2 – Stimulation accentuée de la bande de hautes fréquences par rapport au Préréglage 1 avec en sus une stimulation moyenne de la bande de moyennes fréquences.

Préréglage 3 – Même stimulation des bandes des hautes et moyennes fréquences que pour le Préréglage 2, mais avec une augmentation de la bande de basses fréquences.

Allez dans un environnement relativement calme et placez-vous près d'une source sonore telle qu'un programme TV ou la voix d'une personne et testez chacun des préréglages durant quelques instants. Vous devrez régler le volume à un niveau agréable à chaque fois que vous sélectionnez un préréglage. Essayez tous les préréglages pendant quelques jours dans des situations sonores courantes telles que des conversations ou près d'une TV. Cela vous permettra de déterminer le préréglage et le volume les mieux appropriés à vos besoins.

Le préréglage le mieux approprié est celui que vous utiliserez le plus souvent au cours de la journée. Les réglages automatiques de chaque profil préréglé vous permettront de maintenir le confort et la qualité d'écoute sans avoir à régler le volume, excepté dans des circonstances exceptionnelles.

Familiarisation avec votre CS50

Il vous faudra un peu de temps pour vous familiariser avec l'amplification de votre CS50. Vous entendrez de nombreux sons avec une clarté inhabituelle. Il se peut que les sons ambiants et environnementaux, tels que les froissements de papier ou le bruit de couverts et d'assiettes, vous perturbent au début. Votre cerveau s'habituerà à ces sons. Au bout de deux semaines environ, la gêne initiale disparaîtra et vous vous serez habitué à ce nouvel environnement sonore plus clair et plus pur.

UTILISATION DE VOTRE CS50

Jumelage avec des appareils Bluetooth

Jumelez facilement votre CS50 avec un appareil Bluetooth tels qu'un smartphone ou un ordinateur dans une simple opération unique. Votre CS50 va chercher et tenter de jumeler avec des appareils Bluetooth pendant 3 minutes à chaque fois que vous insérez la batterie. Passé ce délai, si aucun appareil n'a été détecté, le système cessera de tenter de jumeler et la transmission Bluetooth sera interrompue.

1. Vérifiez que la fonction Bluetooth de l'appareil que vous souhaitez jumeler avec est en service. (Voir les instructions de l'appareil pour les détails spécifiques).
2. Insérez une batterie chargée dans votre CS50.
3. Regardez l'appareil que vous tentez de jumeler avec votre CS50. L'inscription CS50 devrait apparaître sur l'écran. Si on vous demande un code PIN, inscrivez « 0000 ».
4. Choisissez le CS50 dans la liste des appareils Bluetooth pour garantir le jumelage. Le CS50 émettra un bip sonore lorsque la connexion Bluetooth est établie. L'émission de deux bips successifs signale que la connexion Bluetooth a été perdue.

Remarque : pour obtenir de meilleurs résultats, maintenez le CS50 dans un rayon inférieur à 3 mètres de l'appareil Bluetooth à connecter.

Répondre aux appels téléphoniques

1. Pour répondre à un appel téléphonique, appuyez sur le bouton volume du CS50. Sur certains téléphones, vous devrez peut-être sélectionner le CS50 pour répondre à un appel.
2. Lors des appels, vous pouvez utiliser le bouton volume pour contrôler le niveau sonore de l'appel. Appuyez pour augmenter le volume, poussez et maintenez le doigt enfoncé pour diminuer le volume.
3. Pour raccrocher, appuyez sur le bouton programme du CS50 ou utilisez les commandes du téléphone.
4. N'appuyez pas sur le bouton programme au cours d'un appel. Cela mettrait fin à l'appel.

Remarque : pour obtenir de meilleurs résultats, placez le téléphone du même côté de votre corps que le CS50.

UTILISATION DE VOTRE CS50

Streaming audio

Le CS50 permet le streaming audio depuis votre smartphone ou ordinateur. Vous pouvez désactiver le mode A2DP depuis l'Application CS Customizer ou depuis les menus media audio de votre appareil. Lorsqu'il est en mode amplification individuelle, le CS50 bascule automatiquement, soit vers le streaming audio lorsque le lecteur média de votre téléphone ou ordinateur émet un son audio, soit vers le téléphone pour vous permettre de répondre à un appel. Lorsque l'appel est terminé ou le lecteur média est éteint, le CS50 rebascule vers le mode amplification individuelle. Nous vous recommandons de désactiver les tons et les sons du pavé numérique tactile sur votre téléphone ou ordinateur pour diminuer les interférences avec l'amplification individuelle.

Personnalisation avancée

Pour découvrir d'autres fonctions et options de personnalisation de votre CS50, rendez vous sur le site **www.SoundWorldSolutions.com**. Vous pourrez y télécharger l'application gratuite Customizer du CS50, pour smartphones et ordinateurs. Il s'agit d'une application qui permet de personnaliser au maximum les réglages de votre CS50 via la connexion Bluetooth.

Sous l'onglet « Personalize » de l'application, vous pourrez initier un programme automatisé qui vous conduira pas à pas vers la personnalisation des performances de votre CS50 selon vos préférences.

L'onglet « Profiles » vous permet de sélectionner un des trois profils pré-réglés ou un profil personnel développé grâce au programme automatisé décrit ci-dessus.

Lorsque vous avez sélectionné un de ces profils au moyen de l'application Customizer du CS50, il devient le profil par défaut du CS50. Vous pouvez désormais utiliser le bouton programme pour basculer entre les réglages additionnels conçus pour optimiser les performances du CS50 dans des situations particulières. (Voir page 64.)

« L'Égaliseur » propose des curseurs qui permettent de régler indépendamment les fréquences aiguës, médiums et graves pour une utilisation personnalisée. Il existe également une barre pour régler le volume, similaire au bouton volume du CS50.

PRÉCAUTIONS ET ENTRETIEN



Pour maintenir les performances optimales de votre CS50, veuillez prendre les précautions suivantes :

- NE METTEZ PAS d'eau ou d'autres liquides dans ou sur l'oreillette.
- NE PORTEZ PAS le CS50 en nageant, sous la douche, sous une forte pluie ou dans un environnement humide.
- NE PORTEZ PAS l'oreillette sans embout.
- N'APPLIQUEZ PAS de solvants ou autres liquides sur l'oreillette.
- NE DORMEZ PAS avec le CS50 allumé.
- N'EXPOSEZ PAS le CS50 ou le chargeur à la lumière directe du soleil ou près d'une source de chaleur intense.
- Retirez le CS50 avant de mettre du maquillage, du parfum, de l'après-rasage, de la laque pour cheveux, des lotions ou tout autre produit susceptible de pénétrer dans l'oreillette.
- Retirez le CS50 lors d'activités ardues, telles que des exercices physiques.
- Conservez le CS50 et le chargeur propre et sec.

Votre CS50 est fourni avec un outil de nettoyage. Au moins une fois par semaine, il est recommandé d'utiliser le crochet situé à l'extrémité de l'outil pour retirer les formations de cire de l'embout et du manchon. Nettoyez régulièrement les surfaces extérieures du CS50 en les essuyant avec un chiffon sec. N'utilisez jamais de solvants pour nettoyer le CS50.

Vous pouvez acheter en ligne des embouts supplémentaires et des batteries de rechange sur le site **www.SoundWorldSolutions.com** ou en appelant au : **1-855-792-0117**.

ANNEXE

DÉPANNAGE

Le CS50 n'émet aucun son

- Vérifiez que la batterie est correctement insérée
- Vérifiez que la batterie est chargée
- Retirez la cire qui pourrait obstruer l'embout ou le manchon

Le son est assourdi ou tronqué

- Vérifiez que l'embout est correctement assemblé au manchon
- Retirez toute cire qui pourrait obstruer l'embout ou le manchon
- Réglez le volume
- Essayez un autre préréglage ou mode environnemental
- Si vous l'utilisez comme écouteur Bluetooth, assurez-vous que vous êtes placé à moins de 3 mètres de l'émetteur

La batterie ne charge pas

- Vérifiez que le kit de chargement est correctement assemblé
- Vérifiez que le chargeur est branché à une source d'alimentation (signal lumineux bleu)
- Vérifiez que la batterie est convenablement insérée dans la station de chargement (signal lumineux rouge)

Le CS50 ne jumelle pas avec mon téléphone

- Vérifiez que la fonction Bluetooth de votre téléphone est active
- Jumelez l'appareil dans un maximum de 3 minutes après avoir mis le CS50 sous tension
- Vérifiez que le téléphone a détecté le CS50 en tant qu'appareil actif
- Utilisez votre CS50 à moins de 3 mètres du téléphone

ANNEXE

GARANTIE

Garantie limitée

Sound World Solutions réparera ou, à sa discrétion, remplacera une oreillette Bluetooth CS50 (le « Produit ») si de son point de vue le Produit présente une défectuosité matérielle et/ou de fabrication. Cette garantie limitée est valable un an à compter de la date d'achat du Produit par le consommateur final (le « Client »). La responsabilité de Sound World Solutions est limitée à la (aux) pièce(s) défectueuse(s). L'ensemble des coûts de transport, taxes et autres frais sont sous l'entière responsabilité du client.

Cette garantie s'adresse uniquement au Client et n'est pas transférable. Pour faire valoir la garantie, le Client doit fournir à Sound World Solutions une preuve d'achat, afin de recevoir un numéro d'Autorisation de retour de marchandise (*Return Merchandise Authorization, RMA*), puis expédier le Produit à Sound World Solutions. Après réception, Sound World Solutions inspectera les défectuosités déclarées du Produit et, s'il s'avère que ces défectuosités ont été présentes au moment de l'achat, Sound World Solutions remplacera le Produit ou remboursera le montant de l'achat dans un délai de 30 jours. Les pièces de rechange ou les produits sont garantis uniquement pour la période de validité de la garantie originale. Sound World Solutions n'effectuera aucun remboursement ou échange sans autorisation préalable.

GARANTIE

Exclusions

Cette garantie limitée couvre uniquement le Produit et son pack batterie, et elle ne couvre pas d'autres accessoires, marchandises ou services; elle prend effet uniquement si les Recommandations d'utilisation ont été suivies et uniquement si le Produit a été utilisé conformément à l'usage pour lequel il a été prévu; elle ne couvre pas les dommages du Produit que Sound World Solutions considère comme liés à une usure normale et à un usage inapproprié ou non conforme avec celui pour lequel il a été prévu ; elle ne couvre pas la non-conformité, les dommages ou les défauts liés à une modification ou une réparation des Produits que Sound World Solutions n'aurait pas autorisé et ne couvre pas les dommages liés aux accidents, aux catastrophes naturelles ou aux cas de force majeure, à la négligence ou au mauvais usage intentionnel, aux modifications ou aux préjudices, ou à tous les Produits qui n'auraient pas été convenablement manipulés, stockés ou utilisés après leur délivrance au Client.

Garantie exclusive

Cette Garantie limitée est une garantie exclusive de Sound World Solutions concernant le Produit. Cette Garantie ne peut être modifiée, transformée ou amendée et Sound World Solutions n'autorise pas et ne sera pas engagée envers d'autres garanties ou interprétations de garantie concernant le Produit par ses mandataires, employés, agents ou autres. CETTE GARANTIE LIMITÉE REMPLACE ET EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE, QUELLE QUE SOIT EXPLICITE OU IMPLICITE. SOUND WORLD SOLUTIONS N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, QUELLE QUE SOIT EXPLICITE OU IMPLICITE EN CE QUI CONCERNE LE PRODUIT, ET REJETTE EXPRESSÉMENT TOUTES AUTRES GARANTIES Y COMPRIS TOUTES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'IDONÉITÉ À UN USAGE PARTICULIER.

ANNEXE

GARANTIE


Limitation de la responsabilité


En aucun cas, la responsabilité ou l'obligation de Sound World Solutions seront engagées de quelque manière que ce soient en ce qui concerne des dommages et intérêts subséquents, indirects, spéciaux ou punitifs, y compris des dommages pour manque à gagner, de propriété ou pour blessures individuelles (y compris la perte de communauté), que ceux-ci soient basés sur un contrat, sur un acte délictuel (y compris la négligence et la responsabilité inconditionnelle) ou autre. L'unique obligation de Sound World Solutions et le dédommagement exclusif du Client sont limités à la réparation ou au remplacement du Produit défectueux selon les termes de cette garantie limitée. CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES, ET VOUS POUVEZ PRÉTENDRE À D'AUTRES DROITS EN FONCTION DE VOTRE JURIDICTION. CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISANT PAS DE LIMITATION SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE OU SUR L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS SECONDAIRES OU SUBSÉQUENTS, IL SE PEUT QUE LES EXCLUSIONS PRÉCÉDENTES NE S'APPLIQUENT PAS À VOUS.

Résolutions des litiges

PAR LES PRÉSENTES, SOUND WORLD SOLUTIONS ET LE CLIENT SUSMENTIONNÉ RENONCENT ABSOLUMENT, IRRÉVOCABLEMENT ET INCONDITIONNELLEMENT, DANS TOUTE LA MESURE AUTORISÉE PAR LES LOIS APPLICABLES, À TOUS DROITS DE POURSUITE JUDICIAIRE PAR JURY POUR TOUTES PLAINTES OU DROITS À FAIRE VALOIR BASÉS SUR OU RÉSULTANT DE OU LIÉS À CETTE GARANTIE LIMITÉE DANS TOUTE ACTION EN JUSTICE, PROCÉDURE OU AUTRES LITIGES QUI SURVIENDRAIENT ENTRE SOUND WORLD SOLUTIONS ET LE CLIENT POUR DES REVENDICATIONS LIÉES AU CONTRAT, À DES ACTES DÉLICTELS OU AUTRES.

INFORMATIONS IMPORTANTES

 **Avertissement :** pour réduire les risques de décharge électrique, ne retirez pas le boîtier. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. En cas de nécessité, faites intervenir un professionnel.

 **Avertissement :** pour réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique, conservez ce produit à l'abri de la pluie et de l'humidité. Conservez le CS50 à l'abri des gouttes et des éclaboussures. Ne placez aucun objet rempli de liquide à proximité du CS50.

Instructions de sécurité importantes

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Tenez compte de tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
6. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
7. N'obstruez pas les conduits de ventilation. Suivez les instructions d'installation du fabricant.
8. Ne placez pas l'appareil près d'une source de chaleur, telle que radiateurs, régulateurs de chaleur, fours ou autres appareils (y compris les amplificateurs) émettant de la chaleur.
9. Ne marchez pas sur le cordon d'alimentation et ne le pincez pas, en particulier auprès des prises de courant, des multiprises et près du point de sortie de l'appareil.
10. Débranchez cet appareil en cas d'orage ou d'inutilisation prolongée.
11. Faites réviser l'appareil par des professionnels. Vous devez le faire réviser s'il est endommagé de quelque manière que ce soit. Par exemple, si le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés, en cas de gaspillage de liquide sur l'appareil, si des objets l'ont heurté ou s'il a été exposé à la pluie ou l'humidité, s'il ne fonctionne plus correctement ou s'il est tombé.

ANNEXE

INFORMATIONS IMPORTANTES

Bluetooth

Le nom et les logos Bluetooth® appartiennent à Bluetooth SIG, Inc. et Sound World Solutions utilise telles marques sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

Avertissements généraux

Si vous avez ou supposez avoir un des symptômes suivants, veuillez ne pas utiliser ce produit avant d'avoir consulté un médecin :

- Antécédents de production excessive de cérumen
- Douleur ou désagrément dans l'oreille
- Présence de liquide dans l'oreille ou drainage de celle-ci depuis moins de 90 jours
- Blocage du canal auditif, infection auriculaire persistente ou sensation d'oreille bouchée
- Difformité évidente de l'oreille
- Perte d'ouïe soudaine ou progressive, ou ouïe fluctuante depuis moins de 90 jours
- Problème d'acuité auditive chronique
- Bourdonnement dans une seule oreille
- Perte d'ouïe dans une seule oreille qui a empiré dans les 90 jours
- Périodes d'étourdissement aigu ou chronique

Les régulateurs cardiaques et les défibrillateurs peuvent réagir aux champs magnétiques. Ne placez pas l'oreillette ou les batteries du CS50 dans une poche de chemise ou à proximité de votre régulateur cardiaque ou défibrillateur.

Conservez toutes les pièces de l'oreillette et du kit de chargement du CS50 éloignées des enfants de moins de 3 ans. Ces composants sont composés de petites pièces susceptibles de provoquer des risques d'étouffement.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Informations réglementaires d'Industrie Canada

Le fonctionnement de cet appareil est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne devrait pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter différentes interférences, y compris les interférences susceptibles de provoquer un dysfonctionnement. Voir RSS-GEN 7.1.5.

Avis du FDA à propos des oreillettes

Les oreillettes ont pour objet d'amplifier les sons ambiants pour les personnes non malentendantes. Elles n'ont pas pour objet de compenser les dysfonctionnements auditifs des consommateurs malentendants. Les exemples de situations lors desquelles on utilise en général les oreillettes incluent la chasse (écoute du gibier), l'observation des oiseaux, l'écoute lors des conférences avec un orateur distant et l'écoute de sons étouffés difficiles à entendre (p.e. conversations éloignées, représentations). Étant donné que les oreillettes ne sont pas destinées à diagnostiquer, traiter, ou soulager des maladies et qu'elles n'altèrent pas la structure ou le fonctionnement du corps, elles ne font pas partie des appareils tels que ceux définis dans le *Food, Drug and Cosmetic Act*. En tant que tel, il n'existe pas de classement régulateur, de code produit ou de définition pour ces produits. En outre, il n'existe aucune exigence d'enregistrement des fabricants ni de référencement de ces produits auprès du FDA.

Néanmoins, les oreillettes sont soumises aux dispositions en vigueur du *Radiation Control for Health and Safety Act* de 1968, par lequel le FDA réglemente les produits électroniques qui émettent des vibrations sonores, tels que les équipements d'amplification du son. (Voir également article 21 CFR 1000.15.) Les fabricants d'oreillettes doivent signaler les défauts et les phénomènes hostiles et prendre les autres mesures décrites dans l'article 21 CFR Part 1003. Les fabricants d'oreillettes doivent également se conformer aux exigences pour racheter, réparer ou remplacer les produits électroniques exigés en vertu de l'article 21 CFR Part 1004.

ANNEXE

INFORMATIONS IMPORTANTES

Informations de la FCC

Cet appareil est en conformité avec la section 15 du règlement de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles d'occasionner un fonctionnement inopportun.

Ce matériel a été testé et est en conformité avec les limites établies pour un appareil numérique de Classe B, ainsi que stipulé à la Section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Ce matériel génère, utilise et peut émettre des fréquences radioélectriques et, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Il est néanmoins impossible de garantir qu'il n'entraînera pas des interférences pour une installation spécifique. Si ce matériel provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'appareil, nous vous encourageons à corriger les interférences en suivant les mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise dissociée du circuit sur lequel est branché le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien professionnel de radio/télévision.

Les utilisateurs ne sont pas autorisés à effectuer des changements ou modifications à l'appareil de quelque manière que ce soit. Les changements ou modifications qui n'auront pas été expressément approuvés par Sound World Solutions sont susceptibles d'invalider l'autorité de l'utilisateur de faire fonctionner l'appareil.



Sound World Solutions

960 N. Northwest Highway
Park Ridge, IL 60068-2358
USA

847-939-6101

Pour communiquer avec le Service à la clientèle ou le
Service technique : composez le 855-792-0117
(numéro vert aux É-U).

SoundWorldSolutions.com